



 **Odonto-Médica**
Nº. 2 / 2023


CRISTÓFOLI
BIOSSEGURANÇA

Super
Lançamento
Cristofoli



Autoclave
Vitale 54 litros
CLASSE B



Autoclave Vitale Class

- Capacidade de 12 ou 21 litros.
- Bivolt automático.
- Design moderno.
- Exclusivo sistema de rastreabilidade.
- Sistema inovador de ajuste de altitude automático para diversas regiões.
- Tampa e câmara em inox.
- 21 sistemas de segurança.
- Teclado de controle na cor azul.
- Secagem ultra eficiente com porta entreaberta.
- 2 anos de garantia.



Assista ao vídeo no Youtube
Autoclave Vitale Class Como Usar



Autoclave Vitale Class CD

- Capacidade de 12 ou 21 litros.
- Design moderno.
- Exclusivo sistema de rastreabilidade.
- Digital com display de LCD.
- Tampa e câmara em inox.
- Bivolt automático.
- Possui 6 programas:
 - Instrumental Embalado /
 - Instrumental Desembalado /
 - Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico
 - e Tecidos / Líquidos / Secagem Extra.
- 27 sistemas de segurança.
- Teclado de controle na cor azul.
- Secagem ultra eficiente com porta fechada.
- 2 anos de garantia.



Assista ao vídeo no Youtube
Autoclave Vitale Class CD Como Usar



Autoclave
Vitale 54L

Porta com sistema de abertura e travamento motorizados.
Design moderno.
Fácil manuseio.
Display de cristal líquido.
Avisos com datas de manutenção preventiva e monitoramento biológico.
Relatório dos parâmetros dos ciclos de esterilização salvo em Pen Drive (PDF).
Atualização de software por meio da Porta USB.
Sistema para diagnóstico de falhas.
6 Programas: Instrumental Embalado; Instrumental Desembalado; Plásticos e Algodão; Kit Cirúrgico e Tecidos; Líquidos e Secagem Extra.



DADOS TÉCNICOS	
PRESSÃO E TEMPERATURA DE TRABALHO (ETAPA DE ESTERILIZAÇÃO)	1,2 kgf/cm² (para ciclos de 121°C) 2,2 kgf/cm² (para ciclos de 134°C)
DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO	Automáticas
SECAGEM	Com porta fechada
CAPACIDADE	54 litros
VOLTAGEM	220 VAC
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Automático
POTÊNCIA	3.600 Watts
CONSUMO ELÉTRICO	750 Watts/hora
PESO BRUTO	89,5 kg
DIMENSÕES INTERNAS DA CÂMARA (DxP)	34 x 66 cm
DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE (LxAxP)	54 x 60,8 x 80 cm
MATERIAL DA CÂMARA E TAMPA	Aço Inox
MATERIAL DA BASE (ESTRUTURA METÁLICA)	Aço carbono com pintura eletrostática.
COR	Branca com teclado azul
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	10363350017



Cuba de Ultrassom Cristófoli

Ideal para limpeza de instrumentos clínicos.
 Capacidade útil de 2,1 litros.
 Reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza.
 Reduz o risco ocupacional.
 Possui 5 ciclos, com opção de aquecimento.
 1 ano de garantia.
 Voltagem 127 V ou 220 V.



Assista ao vídeo no Youtube
Cuba de Ultrassom Cristófoli - Dicas e Vantagens



Destilador Cristófoli

Ecologicamente correto.
 Baixo consumo de água e energia.
 Destila 3,8 litros por ciclo.
 Paga-se em poucos meses.
 Desliga automaticamente.
 Água disponível a qualquer momento no consultório.
 1 ano de garantia.
 Voltagem 127 V ou 220 V.



Seladora Cristófoli

Para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor.
 Possui suporte para rolos que acomoda até dois tubulares de papel de grau cirúrgico.
 Resistência blindada com tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient), garante o controle eficaz da temperatura.
 Aquece em aproximadamente 3 minutos e sela em apenas 6 segundos.
 Selagem por alavanca com trava.
 Sistema integrado de corte em ambas direções.
 Sistema de avisos de LEDs e bips sonoros que indicam:

- Ligada/desligada
- Aquecendo
- Pronta para uso
- Selagem completa

Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos.
 Compacta, dimensões (LxAxP) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm.
 Área de selagem (comprimento): 30 cm.
 Largura de selagem: 12 mm.
 Bivolt automático (110 - 240 V). Potência: 180 W.
 A Seladora Cristófoli cumpre as diretivas e normas internacionais ISO 13485:2016 e CE (Diretiva 2014/30/EU, EN 55014-1 e EN 55014-2).



Higipratic Acionamento elétrico

Acionamento elétrico para torneiras que utilizam acoplamento flexível.
Adaptação extremamente simples.
Evita a contaminação cruzada.
Torneira não inclusa.
6 meses de garantia.
Voltagem 127 V ou 220 V.



Mini-Incubadora

Ideal para incubar indicadores biológicos com respostas em 24 e 48 horas.
Capacidade para incubar até 4 indicadores biológicos.
1 ano de garantia.
Voltagem automática.



Assista ao vídeo no Youtube **Monitoramento da Esterilização em autoclaves - Parte II - Indicadores Biológicos**



Indicador Biológico SteriTest

Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor.
Esporos autocontidos de *Geobacillus stearothermophilus*.
Caixa com 10 unidades.
Resultado em 24 horas.
Validade de 24 meses a partir da data de fabricação.



Indicador Químico SIL-250 Tipo 4

Indicado para monitorar internamente os pacotes em ciclos de esterilização a vapor.
Multiparamétrico: tempo, temperatura e presença de vapor.
Fácil leitura, resultado imediato.
Caixa com 250 tiras (duplas).
Prazo de validade informado na embalagem do produto.



Assista ao vídeo no Youtube **Monitoramento da Esterilização em autoclaves - Parte I - Monitoramento Físico e Químico**



Indicador Químico SteamPlus Tipo 5

Integrador químico para monitorar ciclos de esterilização a vapor.
Integra as 3 variáveis: tempo, temperatura e vapor.
Precisão e facilidade na leitura.
Pacote com 100 unidades.
Prazo de validade informado na embalagem do produto.



Assista ao vídeo no Youtube **Monitoramento da Esterilização em autoclaves - Parte I - Monitoramento Físico e Químico**



Indicador Químico TST Tipo 6

Emulador.
Avalia ciclos específicos quando exposto por 5,3 minutos a 134 °C, 15 minutos a 121 °C ou 8 minutos a 127 °C.
Resultado imediato.
Fácil de interpretar e armazenar.
Acompanha livro de registro.
Caixa com 25 unidades.
Prazo de validade informado na embalagem do produto.




Assista ao vídeo no Youtube **Monitoramento da Esterilização em autoclaves - Parte I - Monitoramento Físico e Químico**



Suporte para Embalagem

Otimiza a capacidade da autoclave.
Acondiciona até 13 envelopes.
Facilita a secagem dos envelopes.
Autoclave de 12 litros: 1 Suporte – 13 envelopes.
Autoclave de 21 litros: 2 Suportes – 26 envelopes.
Autoclave de 54 litros: 4 Suportes - 52 envelopes.

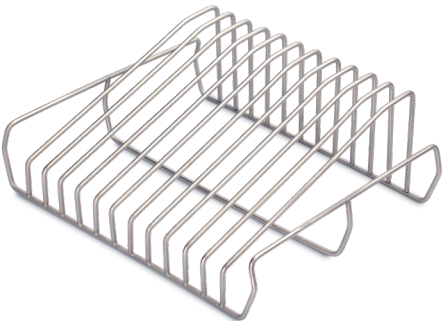

Embalagem Tubular para Esterilização Protex-R

Produzida com papel grau cirúrgico
e plástico.

Ideal para esterilização a vapor.

Medidas disponíveis:
10, 15, 20, 25 e 30 cm x 100 metros.

Validade de 2 anos a partir
da data de fabricação.



Envelopes para Esterilização Protex-E

Produzido com papel grau cirúrgico e plástico.

Ideal para esterilização a vapor.

Medida disponível: 9 x 26 cm

Validade de 2 anos a partir da data de fabricação.

Caixa com 200 unidades.



Cristófoli Equipamentos de Biossegurança Ltda.
C.N.P.J.: 01.177.248/0001-95 - Insc. Estadual: 901.048.606-5
Rua São José, 3209 - Bairro Área Urbanizada II
CEP: 87307-799 - Campo Mourão - PR - Brasil
www.cristofoli.com

Cristófoli, a marca da proteção

Cristófoli Biossegurança, empresa brasileira fabricante e importadora de produtos para a saúde com a certificação ISO 13485 - Produtos para a saúde - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos para fins Regulamentares e atendimento aos Requisitos da RDC 665/2022 - BPF - ANVISA.

